

Гинекологическая сетка G-Mesh® изготовлена из одноволоконной полипропиленовой пряжи (прозрачной и голубой) толщиной волокна 0,10 мм. Гинекологическая сетка G-Mesh® используется в реконструктивной хирургии для лечения опущения женских репродуктивных органов (Pelvic Organ Prolapse, POP).

Голубые ориентирующие линии облегчают видимость и уложение изделия в операционном поле.

На концах лоскутов изделие имеет выступы, облегчающие их вдевание в ушко аппликатора, который используется для введения имплантата сквозь анатомические структуры и расположения его в теле пациентки.

Каждый тип сетки предлагается в одном размере – с возможностью незначительной модификации размера врачом во время имплантации с целью подгонки формы под индивидуальную анатомию пациентки.

Применение:


Хирургические сетки G-Mesh® используются в реконструктивной хирургии для лечения опущения женских репродуктивных органов. Реконструктивная хирургия не должна быть первым выбором лечения и должна быть предназначена для пациенток с симптоматическим опущением детородных органов. Лечение возможно только в том случае, если пациентка или законный опекун осведомлены о возможных осложнениях и выразили согласие на хирургическое лечение. Количество используемой сетки должно быть по возможности ограничено. Хирургическая терапия должна проводиться в соответствии с рекомендациями EAU (*European Association of Urology*).

Виды:

- Posterior 2 (2-х лоскутная)
- Anterior 4 (4-х лоскутная)
- Posterior 6 (6-ти лоскутная)
- стерильная (стерилизованная оксидом этилена)

Размеры и упаковка:

- упаковано поштучно в двойной бумажно-пленочный пакет и картонную коробку

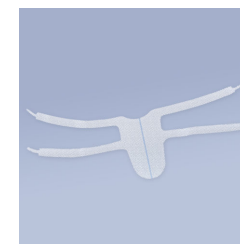

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с
номером 1434

