

Ультралёгкие урологические ленты — это новейшие поколение слинговые имплантаты, используемых в хирургическом лечении стрессового недержания мочи у женщин. Урологическая лента изготовлена из прозрачной и белой, монофиламентной полипропиленовой пряжи. Голубые ориентирующие линии вдоль ленты облегчают процесс имплантации и увеличивают видимость имплантата в операционном поле.

С двух краев имеет цветные (голубые) ручки, которые позволяют безопасно проходить через анатомические структуры пациентки. Ручки также изготовлены из монофиламентной пряжи.

Благодаря ультралёгкой поверхностной массе, атравматичным краям, отличным параметрам прочности, высокой эластичности и очень хорошей биоинертности, изделие может безопасно и эффективно использоваться в хирургическом лечении недержания мочи.

Применение:

- урологические ленты рекомендуется использовать во время хирургического лечения стрессового недержания мочи (СНМ). Хирургическое лечение недержания мочи заключается в подвешивании уретры урологической лентой без натяжения.
- изделие предназначено для имплантации следующими методами: Tension free Vaginal Tape (TVT), Trans Obturator Tape (TOT) или Tension Free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O)



Виды:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена)

Размеры и упаковка:

- длина 30 см и 45 см
- упакованы в двойной бумажно-пленочный пакет со складкой, и коробочку по 1 шт.

Более подробная информация находится на сайте: www.dallop-nm.ru

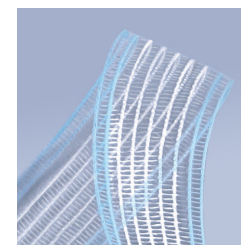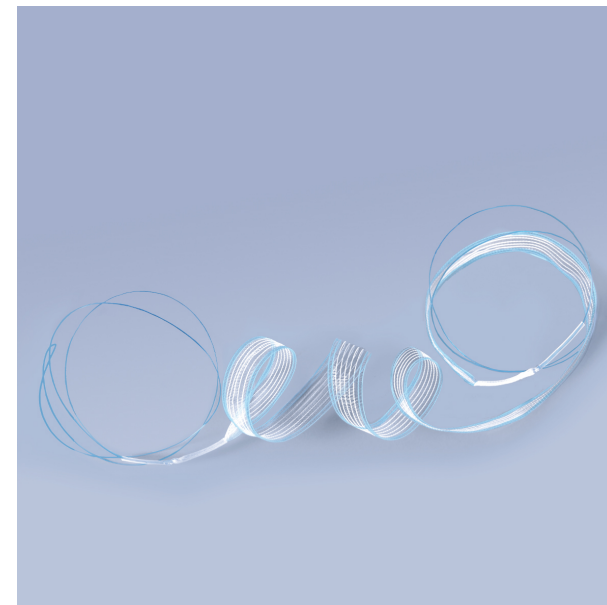

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с
номером 1434

